

Laser a diodo 808 nm

Tre macchine, una sola fisica — ARES 2025 · ARES 2026 IA · URIEL 2026 IA

Revisione — / / · Centro: · Consegnata da:

Il laser non ti porta la cliente una volta. Te la porta dodici.

Ma te la riporta solo se la macchina non si ferma, e se i numeri che imposti sono giusti.

Queste tre macchine fanno lo stesso lavoro, con la stessa fisica.

Cambia una cosa sola: **chi fa i conti.**

Sulla prima li fai tu a mano. Sulle altre due li fa il software, e tu controlli.

Le tre macchine

QUELLA CHE HAI GIÀ

ARES 2025

la piccola bianca



È la macchina che molti centri hanno già in cabina. Diodo 808, lavoro pieno, comandi a mano.

- Diodo **808 nm**, una banda
- Joule, millisecondi e Hertz impostati **a mano**
- Niente telecamera, niente IA
- Classe 4 · interlock di sicurezza

Resta in listino come usato garantito e come permuta.

Prezzo e dati completi: vedi tabella.

IL PASSO AVANTI

ARES 2026 · IA

la grande bianca



Stessa fisica della 2025, ma con la telecamera e l'intelligenza artificiale a bordo. I conti li fa lei.

- **10 diodi** da 100 W · 1500 W
- **Telecamera integrata** + software IA
- Gestione e alimentazione **digitali**
- Sistema **HR / SHR**: griglia, kJ target, fluensa

Listino €25.000 · lancio -30%


€ 17.500

oppure **noleggio € 500/mese**

TOP DI GAMMA

URIEL 2026 · IA

la carrellata

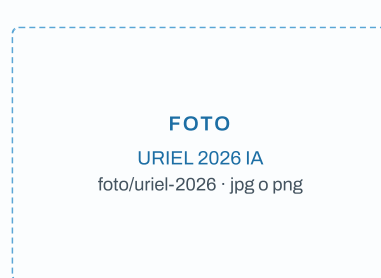

Tre lunghezze d'onda sullo stesso manipolo. Prende ogni pelle e ogni pelo, anche quelli che le altre lasciano lì.

- Fino a **16 diodi** da 100 W · 2000 W
- Fino a **3 bande**: 755 / 808 / 1064 nm
- Touch LCD 15" · IA a bordo
- Raffreddamento radiatore + aria + TEC

Listino €35.000 · lancio -30%

€ 24.500

Noleggio su richiesta.

LA FRASE DA TENERE A MENTE

La fisica è la stessa su tutte e tre. La fluensa che leggi sul pannello nuovo sono i Joule di prima. Millisecondi e Hertz non sono spariti: li calcola il software. Per questo chi sa lavorare sulla 2025 impara la 2026 in mezza giornata.

1 Scheda tecnica a confronto

DATI TECNICI UFFICIALI NIPEC

CARATTERISTICA	ARES 2025	ARES 2026 · IA	URIEL 2026 · IA
Tipo	Laser a diodo	Laser a diodo	Laser a diodo tri-onda
Lunghezze d'onda	808 nm	808 nm	755 / 808 / 1064 nm <i>fino a 3 bande sullo stesso manipolo</i>
Diodi	<i>da fabbrica</i>	10 diodi da 100 W	fino a 16 diodi da 100 W <i>16 diodi in opzione</i>
Potenza	<i>da fabbrica</i>	1500 W	2000 W
Frequenza	<i>da fabbrica</i>	60 Hz	60 Hz · 1-10 Hz
Tipo emissione	1-400 ms <i>da confermare</i>	1-400 ms · Macro Canale	1-400 ms · Macrocanale
Raffreddamento	<i>da fabbrica</i>	TECH cool con Micro Chip	Radiatore + Aria + TEC Cool
Interfaccia	Pannello manuale: Joule · ms · Hz	Display touch digitale	Touch LCD 15"
Telecamera integrata	no	sì	sì
Software IA	no	sì · HR / SHR / SHR Stack	sì
Gestione	Manuale	Digitale	Digitale a controllo elettronico
Alimentazione	<i>da fabbrica</i>	A controllo digitale	Digitale a controllo elettronico
Rete elettrica	AC 220V / 110V	AC 220V / 110V	AC 220V / 110V
Testina	Titanio <i>da confermare</i>	Titanio	Titanio
Sicurezza	Classe 4 · Interlock	Classe 4 · Interlock	Classe 4 · Interlock
Certificazione	CE	CE italiana · MDR	CE italiana · MDR
Formato	Da banco	Da banco	Carrellata

LE CASELLE CON I PUNTINI

Sulla ARES 2025 ci sono voci che non riportiamo a memoria. Si compilano con la scheda della fabbrica, non a occhio: su un laser un numero sbagliato scritto su un foglio diventa un numero sbagliato impostato in cabina. Finché non arrivano, quelle righe restano vuote.

2 Come si legge quella tabella

IN LINGUA DA CABINA

QUELLO CHE LEGGI	QUELLO CHE È
Watt	Il motore. Più watt, più potenza disponibile: la zona grande la fai in meno passaggi e la cliente sta meno tempo sul lettino.
Diodi	Le lampadine che fanno il colpo. Più diodi, più luce nello stesso istante e meno fatica per la macchina — quindi meno soste a raffreddare.
Bande (lunghezze d'onda)	Quanto in profondità arriva. 755 prende il pelo sottile e chiaro, 808 è il cavallo di battaglia, 1064 scende in profondità e lavora sulle pelli scure. Tre bande = tre tipi di cliente, con un solo manipolo.
Millisecondi	Quanto dura il colpo. Pelo grosso vuole colpo lungo, pelle delicata colpo corto.
Hertz	Quanti colpi al secondo. È la velocità con cui scorri la zona.
Fluenza (J/cm ²)	I Joule di prima, scritti in un altro modo. È la quantità di energia che lasci su ogni centimetro di pelle.
HR / SHR	Due modi di lavorare. HR: colpo singolo e forte, a griglia. SHR: passaggi ripetuti e più leggeri, scaldando in movimento. SHR è quello che si tollera meglio sulle pelli reattive.
Testina in titanio	Il pezzo che tocca la cliente. In titanio non si opacizza e non si consuma come le altre: è la parte che normalmente si cambia e si paga.
Classe 4 · interlock	È un laser vero, e la legge lo tratta come tale: occhiali sempre, chiave e blocco di sicurezza. L'interlock è quello che lo spegne se qualcosa non è a posto.

3 Cosa c'è di nuovo sul 2026

LE VOCI PER CUI SI CAMBIA MACCHINA

Gestione e alimentazione digitali

Sulle macchine vecchie la corrente arriva ai diodi come arriva dalla presa: se la rete del negozio balla, ballano anche i colpi. Qui l'elettronica tiene la corrente ferma colpo dopo colpo.

In cabina: il colpo numero cento è uguale al colpo numero uno. La cliente non ti dice più «oggi l'ho sentito di più».

Telecamera integrata · software IA

La telecamera guarda la pelle e il pelo. Il software legge quello che vede e propone i parametri: griglia, kJ target, fluenza. Tu resti quella che decide — la macchina non parte da sola — ma non parti più da un foglio di carta e dall'esperienza a occhio.

In cabina: l'operatrice nuova fa una seduta corretta dal primo giorno, e tu non devi stare dietro a ogni impostazione.

2000 watt

È la potenza della URIEL 2026. Serve sulle zone grandi: gambe intere, schiena, addome. Più potenza disponibile vuol dire meno passaggi per coprire la stessa superficie.

In cabina: più clienti nella stessa giornata, a parità di risultato.

Fino a 16 diodi, in opzione

I diodi si aggiungono. Si parte con la configurazione che serve oggi e si sale quando il centro cresce, senza buttare la macchina.

In cabina: la macchina scalda meno e si ferma meno a raffreddare.

Fino a 3 bande sullo stesso manipolo

755, 808 e 1064 nanometri nello stesso pezzo che tieni in mano. Non cambi manipolo, non cambi macchina, non mandi via la cliente dicendo che sulla sua pelle non si può fare. La pelle scura e il pelo chiaro — i due casi che di solito si rifiutano — qui si lavorano.

In cabina: non dici più di no a nessuno. E quello che prima rifiutavi, lo fatturi.

4 Certificazione

CERTIFICATA CE IN ITALIA

Non è una macchina importata e rimarchiata. **Prodotto certificato in Italia**, con marcatura CE italiana. Vuol dire che il fascicolo tecnico, la dichiarazione di conformità e il numero di serie sono rintracciabili, e che se ti arriva un controllo c'è una carta da mostrare con un nome e un indirizzo dietro.

MDR — LA DATA CHE CONTA

Il laser epilatorio è un **dispositivo medico**. La regola che lo governa è il Regolamento europeo MDR.

Le nostre macchine sono già MDR: attivo, adesso.

Secondo quanto ci conferma la fabbrica, **da gennaio 2027 l'MDR diventa obbligatorio**: da quella data una macchina senza MDR non è più una macchina con un vantaggio in meno — è una macchina che non puoi usare.

Chi compra oggi una macchina non MDR la paga due volte: una adesso, e una quando deve sostituirla.

5 Le quattro domande da fare a qualunque fornitore

ANCHE A NOI

Prima di firmare con chiunque, queste quattro. Se una risposta non arriva per iscritto, quella è la risposta.

LA DOMANDA	PERCHÉ LA FAI
1. La macchina è marcata CE come dispositivo medico MDR? Me lo scrivi sul contratto?	Da gennaio 2027 è la differenza fra una macchina che lavora e un mobile.
2. Se si ferma, in quanto tempo ho un muletto in cabina?	Un laser fermo una settimana sono dodici clienti che saltano il turno e non tornano più nella finestra.
3. Chi mi forma, quando, e la formazione è dentro il prezzo?	Una macchina che nessuno sa impostare è una macchina che non lavora.
4. La testina è compresa o si paga a parte dopo? Quanto dura e quanto costa?	È il pezzo che si consuma. È lì che il prezzo basso di oggi torna indietro.

CON OGNI LASER NIPEC, SEMPRE DENTRO

Formazione del team inclusa — operative da subito, non dopo tre mesi.

Muletto entro 48 ore in caso di guasto: non chiudi mai un'ora.

Assistenza diretta — un riferimento con nome e cognome, non un call center.

Installazione e avvio seguiti da noi, in sede.

Garanzia 12 mesi.

6 Prezzi

MACCHINA	LISTINO	LANCIO -30%	NOLEGGIO
ARES 2025	*****	*****	*****
ARES 2026 · IA	€ 25.000	€ 17.500 <i>risparmi € 7.500</i>	€ 500 / mese <i>senza vincoli, lo fermi quando vuoi</i>
URIEL 2026 · IA	€ 35.000	€ 24.500 <i>risparmi € 10.500</i>	 <i>su richiesta</i>

Offerta lancio -30% **valida fino al 30/11/2026**. Prezzi IVA esclusa. Garanzia 12 mesi. Permuta della macchina usata valutata caso per caso.

IL PASSO SUCCESSIVO

La prova in sede si fa quando vuoi: porti due clienti, imposti con noi, vedi la macchina lavorare sulla loro pelle. Non si firma niente quel giorno.

NIPEC · Tecnologie Estetiche — Assistenza e informazioni **351 846 6025**

QUELLO CHE IL CENTRO HA CHIESTO OGGI

DATA DELLA PROVA IN SEDE

REFERENTE DEL CENTRO

PER NIPEC